


J172 手首サポーター 取扱説明書

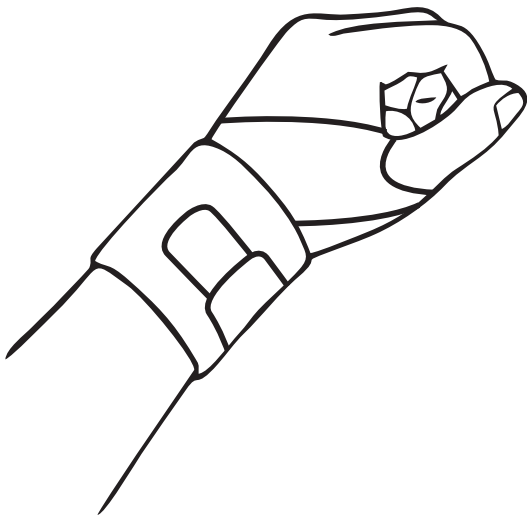

このたびは、本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
安全かつ正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。

使用上の注意（必ずお読みください）

本取扱説明書では、安全に関わる注意事項をその危険の大きさの程度に応じて次のように分類しています。

⚠ 警告：誤った使い方をすると、人が重傷を負う可能性がある事項。

⚠ 注意：誤った使い方をすると、人が軽傷を負うか、または本製品以外の財物に損害を与える可能性がある事項。

異常の発生や症状の悪化を防ぐため、以下の場合は使用しないでください。


- アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方。
- 装着部に骨折、傷、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常がある場合。
- 手首以外の部位に使用しないでください。
- 適用サイズ範囲内でご使用ください。（測定方法および適用範囲はP.2をご参照ください。）
- 就寝時は使用しないでください。
- 長時間装着する場合は、適宜装着し直してください。長時間の圧迫により、皮膚障害や血行障害を起こすおそれがあります。
- 本製品に摩耗、損傷がある場合は使用しないでください。



- 装着手順に従って正しく使用してください。
- サポーター本体をきつく締めすぎないでください。
- 使用中にゆるんだりずれたりした場合は、必ず手順の最初から正しく装着し直してください。
- 本製品の加工、改造、修理を行わないでください。
- 装着部にケガ、骨折、傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 適度に装着を外し、皮膚を休ませたうえで、清潔な状態で使用してください。長時間の装着や強い摩擦により、肌への刺激や汗の滞留が起こり、赤みやかゆみを引き起こす場合があります。
- 嗅覚が敏感な方は、においを感じた場合、風通しの良い場所で1～2時間置いてください。
- 装着感を重視し柔軟い素材を使用しているため、長時間の使用で形が変わることがありますが、機能には影響ありません。気になる方はお問い合わせください。
- 本製品は消耗品です。使用状況に応じて、適宜交換してください。



各部の名称

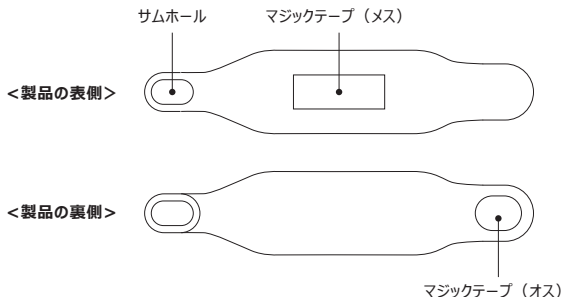

※本製品は左右兼用・男女兼用タイプです。

用途

手首の過度な動きをサポートし、トレーニングやスポーツ時の捻挫リスクを軽減します。


対象者

- 各種スポーツ愛好者（バスケットボール、バドミントン、筋力トレーニングなど）。
- 長時間のデスクワークや手首をよく使うオフィスワーカー、家事作業など。

対应手首周囲

対应手首周囲：15～22cm（マジックテープで自由に調整でき、ほとんどの方の手首サイズに対応します）。

※手首周囲の測定方法については右図をご参照ください。

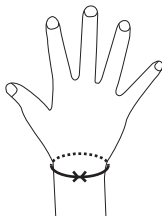

装着手順



①親指を通す
手の甲側へ巻く



②小指側で
巻きつける



③ちょうど良い強さ
で巻いて固定

お手入れ方法

- 中性洗剤で手洗いしてください。
- アイロンや塩素系漂白剤は使用しないでください。
- 乾燥機は使用しないでください。使用すると製品を傷める原因となります。
- 本品はドライクリーニングできません。



注意

- 色の薄いものと一緒に洗濯しないでください。色落ちや他の生地へ色移りする場合がありますので、ご注意ください。
- 他の衣類などと一緒に洗濯する場合は、洗濯ネットを使用してください。マジックテープが他の衣類につくと、ほつれや伝線の原因となります。

仕様

商品名	手首サポーター
型番	J172
対応手首周囲	15～22cm
外形寸法	約365×80×1mm
本体重量	約13g
原材料	高弾性繊維

お問い合わせフォーム

- ※お願い：本品を廃棄する際は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※**本製品は消耗品です。使用状況に応じて、適宜交換してください。**
- ※万一不良などお気づきの点がございましたら当社までご連絡ください。

