


痒み止めペン J153

取扱説明書

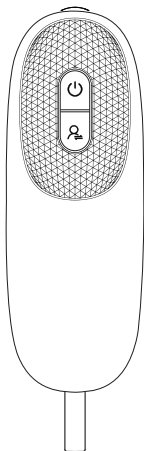


このたびは、Monons商品をお買上げ頂き、
誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

目次

1.製品の構成.....	1
2.製品の機能と付属品.....	1
3.安全上のご注意.....	2
4.使用方法.....	4
5.使用後の手入れ.....	7
6.故障が発生した場合.....	8
7.仕様.....	10
8.保証条項及び保証書.....	11
9.Mononsカスタマーサポートセンター.....	12

1、製品の構成

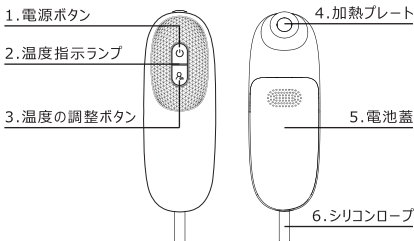

2、製品の機能と付属品

2.1 製品の機能

このデバイスの機能は、加熱（局所的な温熱療法）によって蚊の刺咬後に残るタンパク質の活性を低下させ、蚊の刺咬や刺痛によるかゆみや腫れを軽減することです。

2.2 製品の付属品

外箱の外観が完好であることを確認し、すべての付属品が含まれていることを確認してください。使用前にすべての包装を取り外し、機器および付属品に損傷がないことを確認してください。もし何か疑問があれば、使用を中止し、販売元または指定されたカスタマーサポートセンターに連絡してください。

- 電子かゆみ止めペン × 1本
- AAA型（LR03 1.5V）乾電池 × 2本
- 取扱説明書 × 1冊

開梱時に輸送中の損傷が発見された場合は、販売元に連絡してください。

3、安全上のご注意

3.1 注意

本機器を使用する前に、使用説明書をよくお読みいただき、大切に保管してください。再度確認する際に参照できるようにしてください。他の使用者もこの使用説明書を読んで、本書に従って操作を行ってください。

次の場合に本機器を使用しないでください：

- 糖尿病患者：糖尿病患者は痛みの感覚が鈍く、本機器を使用することでやけどを負う可能性があります。
- 障がいのある方、10歳以下の子供、または温度感覚が鈍い方（例：皮膚に傷跡がある方、皮膚疾患をお持ちの方、鎮痛剤・アルコール・薬物を摂取した直後の方）。
- 目の周り、まぶた、口または粘膜。
- 急性または慢性の皮膚疾患がある部位（傷、炎症、赤み、発疹、やけど、凍傷、打撲、腫れ、開いた傷、治癒過程に影響を与える術後の傷跡など）。
- 発熱している人。
- 皮膚が敏感な部位。
- 痛みの感覚が低下している方（例：代謝異常の方）。
- ローション、クリーム、ジェルを塗った部位。
- 長時間熱刺激を受けている皮膚の部位。

3.2 警告

- 12歳以下の子供は、大人の監督を受けて本製品を使用してください。
- 皮膚疾患や重篤な病気（特に血栓塞栓症を引き起こす可能性のある病気）をお持ちの方、または原因不明の慢性疼痛がある方は、使用前に必ず医師に相談してください。
- 使用中または使用後に症状が悪化した場合は、直ちに使用を中止し、医師の診察を受けてください。
- ダニに刺された場合、刺し傷が病原菌の伝播を引き起こす可能性があるため、直ちに医師に相談してください。
- かゆみの悪化、皮膚の赤み、腫れ、めまい、吐き気、息切れ、蕁麻疹、または血圧の低下や上昇の初期兆候が現れた場

合は、直ちに医師の診察を受けてください。


- 目の周り、まぶた、口、または粘膜には使用しないでください。また、湿った皮膚への使用も避けてください。
- 本機器を子供のおもちゃとして使用しないでください。
- 機器は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
- 包装材は窒息の危険があるため、子供の手の届かない場所に保管してください。
- 本機器の使用時は、一般的な衛生対策を講じてください。
- 本機器は医療相談や治療の代わりにはなりません。体調に異常がある場合は、必ず医師に相談してください。
- 機器が正常に作動しない場合や、使用中に体調が悪化した場合は、直ちに使用を中止してください。

3.3 バッテリーの取り扱いに関する注意事項

- バッテリーから液体が漏れ、皮膚や目に触れた場合は、直ちに水で洗い流し、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- 小さな子供がバッテリーを誤飲すると窒息の危険があります。子供の手の届かない場所に保管してください。
- バッテリーを火に投げ込まないでください（爆発の危険があります）。
- バッテリーを分解、開封、圧迫しないでください。
- バッテリーが漏れた場合は、防護手袋を着用し、乾いた布でバッテリーケースを清掃してください。
- 極性記号（+ 正極 / - 負極）を確認し、正しくセットしてください。
- バッテリーの過熱を防いでください。
- バッテリーを充電したり、ショートさせたりしないでください。
- 長期間使用しない場合は、バッテリーが漏れ出して機器を損傷しないよう、バッテリーをバッテリーケースから取り出してください。
- 同じタイプまたは同等のタイプのバッテリーのみを使用してください。
- 必ずすべてのバッテリーを同時に交換してください。
- 充電式バッテリーは使用しないでください。


- バッテリーを分解したり、解体したり、押しつぶしたりしないでください。
- 電磁干渉の影響を受ける場合があります、その際は機器の使用が制限される可能性があります。
- 本機器を他の機器のすぐ隣に置いたり、重ねたりしないでください。動作不良の原因となる可能性があります。やむを得ず近接して使用する場合は、関連機器が正常に動作していることを確認してください。
- 上記の規定を守らない場合、機器の性能に影響を及ぼす可能性があります。

電池カバーの取り外し方法

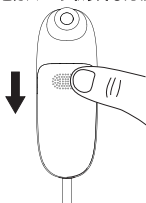

親指で滑り止め部分を押さえ、そのまま下方向へ押し動かすと、電池カバーを取り外せます。

電池カバーの取り付け方法

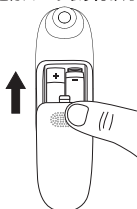

電池カバーの上部を電池ケースの下半分に密着させ、滑り止め部分を押さえながら、上方向へ押し動かすと、しっかりと取り付けられます。


4、使用方法

注意：使用前に、かゆみの原因となる部位に刺さったままの針が残っていないか確認してください。もし残っている場合は、使用前に慎重に取り除いてください。


蚊や虫に刺された後、できるだけ早く使用することが効果的です。これは、この時点で毒素がまだ皮膚に十分に作用していないためです。

刺された後、かなり時間が経過したり、かゆみや炎症、腫れが始まった後に使用を始めると、かゆみ止めの効果は限定的です。しかし、使用をお勧めします。ほとんどの場合、かゆみを和らげ、治癒を早める効果があります。


1. 電源ボタン（1）を押して機器を起動します。温度指示ランプ（2）が緑色に点灯し、音が鳴ることで、使用可能であることを示します。

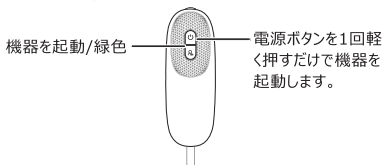

2. 1段階：機器の加熱板（4）をかゆみのある部位に当て、温度の調整ボタン（3）を1回押すと、1段階モードが開始されます。温度指示ランプ（2）は青色に点灯し、加熱が開始されたことを示します。加熱温度は $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ です。初めて使用する場合や敏感肌（特に子供）には、1段階モードの使用を推奨します。

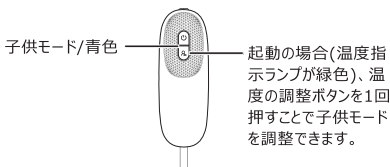

3. 2段階：機器の加熱板（4）をかゆみのある部位に当て、温度の調整ボタン（3）を素早く2回押すと、2段階モードが開始されます。温度指示ランプ（2）は黄色に点灯し、加熱が開始されたことを示します。加熱温度は $50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ です。成人には、2段階モードの使用が適しています。

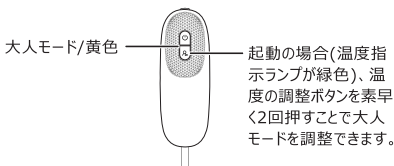

4. 使用終了後、機器は音声信号を発し、加熱板（4）の加熱が自動的に停止します。温度指示ランプ（2）は消灯します。音が鳴ったら、加熱板（4）を取り外してください。

低電力警告：バッテリーの残量が次の使用に足りない場合、温度指示ランプ（2）が3回連続して点滅し、機器は3回連続で音声信号を発します。早急に機器の2つのバッテリーを交換してください。

注意事項

1. 使用者の皮膚が敏感な場合、加熱温度が不快に感じる場合があります。ごくまれに、刺すような痛みを感じることもあります。皮膚の神経によるかゆみを和らげるためには軽い熱痛が必要ですが、温度が高すぎると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
2. 必要に応じて、5分の休憩後に再度同じ部位にかゆみ止めを使用することができます。また、別の部位にある別のかゆみのある箇所にもすぐに使用することもできます。同じかゆみの部位には1時間以内に最大5回使用可能です。
3. 使用を終了する場合は、電源ボタン（1）を押して機器をオフにしてください。温度指示ランプ（2）が消灯します。5分間操作がない場合、機器は自動的にシャットダウンします。
4. 保管する前に、機器がオフになっており、加熱板（4）が冷却されていることを確認してください。

5、使用後の手入れ

5.1 注意事項

- 濡れた手で機器に触れないでください。機器に水をかけないでください。機器が完全に乾燥するまで、使用しないでください。
- 清掃剤や溶剤を使用しないでください。機器が水に濡れると、電子機器や他の部品が損傷し、故障の原因となる可能性があります。
- 本機器は個人用です。複数人での使用は推奨しません。
- 乾燥した場所で、直射日光を避けて保管してください。
- 機器が衝撃を受けたり、湿気やほこりにさらされたり、化学物質で汚染されるのを防いでください。また、温度差が少なく、熱源（オープン、ヒーターなど）から遠く離れた場所に保管してください。
- 機器が水に濡れないよう注意してください。万が一濡れた場合は、バッテリーを取り出し、完全に乾燥するまで使用を中止してください。
- 機器を保管する際は、上に重い物を置かないようにしてください。
- 使用前に、機器や付属品に目立つ破損がないことを確認してください。もし不明点があれば、使用を中止し、販売店または指定されたカスタマーサービスに連絡してください。
- 機器は天候の影響を受けない場所に保管してください。また、指定された環境で保管してください。環境温度が-10℃以下または50℃以上の場合、使用前に最低または最高の保管温度から少なくとも4時間は温度を調整してください。

5.2 清掃とメンテナンス

以下の衛生指針に従って、健康リスクを避けてください。

- 本機器は繰り返し使用できます。
- 使用前に必ず機器を清掃することをお勧めします。
- 清掃前には、必ず機器の電源を切り、バッテリーを取り出し、冷却を待ってください。
- 清掃には、柔らかい乾いた布のみを使用してください。
- 皮膚や粘膜に接触すると有害な物質を使用しないでください。また、研磨剤を含む清掃用品や水に浸しての清掃は避けてください。
- 食器洗い機で機器や付属品を清掃しないでください。
- ブラシや同様の工具を使って機械的に清掃しないでください。これにより、修理不可能な損傷を引き起こす可能性があります。
- 複数の部位に使用する場合は、使用ごとに加熱板を清掃することをお勧めします。これにより、細菌の移動を防ぐことができます。市販のアルコール消毒綿などで加熱板を消毒してください。

5.3 廃棄処理

すべてのユーザーは、電気機器または電子機器を、毒性物質の有無にかかわらず、市または商業的な収集ポイントに引き渡す義務があります。これにより、環境に優しい方法で処理されます。

機器を廃棄する前に、バッテリーを取り外してください。バッテリーは家庭ゴミとして処理せず、リサイクルステーションや店舗のバッテリー回収ステーションで適切に処理してください。バッテリーには有害な重金属が含まれている可能性があり、特別な処理が必要です。

処理に関する詳細は、地元の自治体または供給者にお問い合わせください。



6、故障が発生した場合

故障説明	原因	対処方法
デバイスが起動しません。	バッテリーが正しく取り付けられていません。	バッテリーを確認し、再度取り付けてください。
	バッテリーの残量がなくなっています。	取扱説明書に従って、バッテリーを交換してください。
デバイスの加熱温度が設定温度に達しない。	バッテリー残量が非常に低いです。	取扱説明書に従って、バッテリーを交換してください。
デバイスが連続して3回の音声信号を出力するか、温度指示ランプ(2)が点滅し続け、デバイスを再起動しても状況が改善しない場合。	バッテリー残量が非常に低い場合、デバイスが正常に動作し続けることができません。	取扱説明書に従って、バッテリーを交換してください。
温度指示ランプ(2)が緑色で常に点灯しているが、デバイスが使用できない場合。	デバイスを再起動する必要があります。	再度電源ボタン(1)を押してください。
デバイスが連続して5回の音声信号を出力し、温度指示ランプ(2)が点滅する場合。	潜在的な故障の可能性あります。	デバイスをオフにし、10分後に再起動してください。もしこの状況が繰り返し発生する場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。

お願い

上記の方法でも問題が解決しない場合、Mononsカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

7、仕様

商品名	痒み止めペン
型番	J153
外形寸法	110mm*34mm*24mm
本体重量(本体のみ)	28g
電源	LR03 AAA 1.5 V(2本)
最大温度	50℃ ± 2℃
機能	1段階：3s, 45℃±2℃; 2段階：6s, 50℃±2℃
保管環境	温度：-10℃～ 50℃ 相対湿度：30%～85% 気圧：700hPa～1060hPa
使用環境	温度：10℃～40℃ 相対湿度：30%～85% 気圧：700hPa～1060hPa

長期間バッテリーを外して保管する場合は、バッテリーを取り外し、30℃以下の環境に保管してください。

当社は製品の継続的な改善方針に基づき、予告なく技術的および外観の変更を行う権利を保有しています。技術的な変更があった場合は、変更後の仕様が適用されます。

8、保証条項及び保証書

オールメディ(Monons)

持込修理

痒み止めペン 保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合、本書裏面に記載されている内容に基づき、無料で修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただいた個人情報の利用目的は、本書裏面に記載されています。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店(ネットショップを含む)にご連絡ください。

品番	J153
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様情報	ご住所 _____
	氏名 _____ 様
	電話番号 () - _____
販売店情報	住所・販売店名 _____
	電話番号 () - _____

9、お問い合わせフォーム

製品の仕様や利用方法についてのご質問、またはご意見などがございましたら、QRコードをスキャンしてお問い合わせ内容をご記入ください。初期不良が発生した場合は、迅速に交換などの対応をいたします。

Email: support@monons.net

公式Line: <https://page.line.me/monons>

営業時間: 平日 10:00~18:00(※土日祝日、年末年始を除く)

